

Über Stonsil™


Stonsil™ ist ein innovatives Produkt zur einfachen und sicheren Entfernung von Mandelsteinen. Mit der im **Stonsil™**-Produktpaket enthaltenen Pipette und dem Radiergummi können Sie Mandelsteine bereits bei der ersten Anwendung effektiv entfernen und die Symptome, die Sie verspüren, sofort lindern. Die Pipette wurde speziell für den Heimgebrauch entwickelt und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für die Gesundheit der Mundhöhle und der oberen Atemwege. Die Wirksamkeit von **Stonsil™** wurde von HNO-Ärzten auf der ganzen Welt bestätigt, die die tägliche Anwendung des Produkts empfehlen. Für höchste Hygiene und Wirksamkeit wird empfohlen, **Stonsil™** alle 6 Monate auszutauschen.

Produktvorteile

Stonsil™ ist das einzige Produkt auf dem Markt, mit dem Sie bis zu 100 % der Mandelsteine einfach und sicher entfernen können. Es wird von Experten aus der gesamten Branche für die tägliche und häusliche Reinigung der Mandeln und der Mundhöhle empfohlen. Die in der **Stonsil™**-Verpackung enthaltene Pipette besteht aus hochwertigem Borosilikatglas, das aufgrund seiner gesundheitlichen Unbedenklichkeit in der Medizin häufig verwendet wird. Mit dem im Set enthaltenen Gummiband können Sie die Saugkraft der in den Mandelkrypten befindlichen Steine ganz einfach regulieren. Das **Stonsil™**-Produkt ermöglicht eine einfache Montage und Demontage seiner Teile und damit deren gründliche Reinigung nach jedem Gebrauch. Die regelmäßige Anwendung der **Stonsil™**-Pipette regt das Lymphsystem an, beseitigt die typischen Symptome von Mandelsteinen und beugt deren Neubildung vor. Das Produkt ist bequem zu verwenden und sein kompaktes und zweiteiliges Design ermöglicht einen einfachen Transport.

STONSIL™

[STONSIL.COM](https://www.stonsil.com)

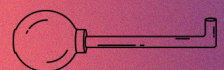


Verwendung

Stellen Sie vor jedem Gebrauch von **Stonsil™** sicher, dass die im Set enthaltene Pipette und das Gummiband keine sichtbaren Schäden aufweisen, und desinfizieren oder reinigen Sie diese anschließend gründlich. Nach Durchführung dieser Tätigkeiten sollte das Gummiband am Ende des dafür vorgesehenen längeren Teils der Pipette angebracht werden. Bei richtiger Platzierung sollte der Radiergummi vollständig am Objektträger haften und beide sichtbaren Laschen sowie die drei Vertiefungen am Hals abdecken. Sobald **Stonsil™** gebrauchsfertig ist, sollte es in den offenen Mund gegeben werden, wobei die gegenüberliegende Spitze der Pipette in Richtung der Mandeln zeigen sollte. Sie befinden sich im hinteren Teil des Mundes, direkt hinter dem sichtbaren Gaumenbogen. Setzen Sie das zweite Loch der Pipette auf die Mandeln und drücken Sie den Radiergummi so, dass der erzeugte Unterdruck die Steine ansaugt, die sich außerhalb und innerhalb der Mandelkrypten befinden. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung von **Stonsil™** alle Maßnahmen langsam und sorgfältig durchzuführen. Dieser Vorgang sollte wiederholt werden, bis zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden und die Symptome auf beiden Seiten des Mundes verschwinden. Wenn viele Mandelsteine auf einmal abgesaugt werden, reinigen Sie die Pipette und den Radiergummi erneut, bevor Sie mit der Reinigung fortfahren. Während und unmittelbar nach der Anwendung von **Stonsil™** kann es zu übermäßigem Speichelfluss sowie zu Beschwerden an der Entfernungsstelle der Mandelsteine kommen. Diese Symptome sind für den Körper völlig natürlich und sollten kurz nach Abschluss der Reinigung der Mandeln und ihrer Krypten abklingen. Wenn eine Tonsillenreizung auftritt, die sich am häufigsten als leichter Schmerz bemerkbar macht, stellen Sie die Anwendung von **Stonsil™** ein, bis die Symptome abgeklungen sind. Es wird empfohlen, die Pipette und den Radiergummi bei Beschädigung oder Abnutzung auszutauschen, mindestens jedoch alle 6 Monate. Nach jedem Gebrauch sollte **Stonsil™** zerlegt und anschließend desinfiziert oder das gesamte Produkt gründlich gereinigt und getrocknet werden.

STONSIL™

STONSIL.COM

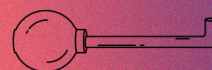

Kontraindikationen

Verwenden Sie **Stonsil™** nicht, wenn Sie Mundreizungen verspüren. Es wird nicht empfohlen, es bei Medikamenteneinnahme oder bei chronischen Erkrankungen, insbesondere im Zusammenhang mit den oberen Atemwegen, zu verwenden. Schwangere und stillende Frauen sowie Personen nach einer Operation sollten vor der Anwendung von **Stonsil™** einen Arzt oder Spezialisten konsultieren. Das Produkt darf ab dem ersten Gebrauch nur von einer Person verwendet werden. Es ist nur für den Heimgebrauch für Erwachsene und gesunde Menschen bestimmt.

Lagerung

Stonsil™ ist resistent gegen Umwelteinflüsse, aber die Lagerung an einem trockenen, kühlen und lichtgeschützten Ort kann seine Lebensdauer verlängern. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen und bewahren Sie **Stonsil™** nach Gebrauch in der Originalverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Warnung

Wenn bei Ihnen eine allergische Reaktion oder Nebenwirkungen auftreten, beenden Sie die Verwendung des Produkts und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Im Zweifelsfall oder bei gesundheitlichen Problemen konsultieren Sie Ihren Arzt oder einen anderen Spezialisten, bevor Sie die **Stonsil™**-Pipette zum ersten Mal verwenden.

STONSIL™

STONSIL.COM

